


KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

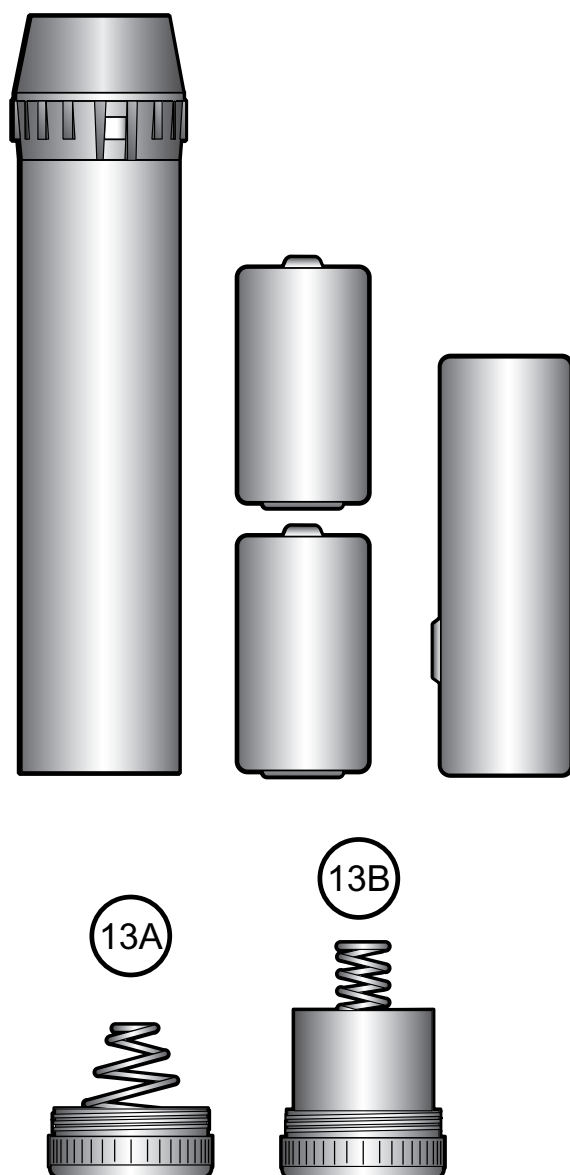

LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT

Keeler håndtag C-størrelse

Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kunders skyld skal alle advarselsinformationerne i dette afsnit iagttages. Hensigten med følgende oplysninger er at fremhæve potentielle sikkerhedsfarer, der kan forbindes med forkert brug eller beskadigelse.

Advarsel



Dette produkt må ikke bruges, hvis der er brændbare gasser i nærheden.

Batteriet må ikke skilles ad eller modificeres. Der er ingen servicérbare dele inden i.

Bortskaf ikke batteriet ved brænding. Batteriet må ikke punkteres.

Brug ikke et batteri, der er deformeret, lækker, er korroderet eller synligt beskadiget.

Stop straks brugen af produktet og kobl det fra nettet, hvis det afgiver en mærkelig lugt, varme eller røg. Fortsat brug af beskadigede produkter eller dele kan forårsage kvæstelser.

Enheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

Brug ikke enheden hvis den er beskadiget, og foretag visuelle eftersyn med jævne mellemrum.

Der kan kun bruges håndtag med rød base fra Keeler i Keelers ladere. Forsøg ikke at isætte et håndtag med blå base i ladere fra Keeler. Se Keelers håndtags- og pæreidentifikation.

Forsigtig

Tag tørbatterier ud inden vækgemning over længere tidsperioder.

Brug kun Keelers genopladelige batteri delnr. 1919-P-7069

Oplad med Keelers ladere.

Kombinér ikke forskellige typer batterier.

Oplad ikke batterier i omgivelser hvor temperaturen kan overstige 40°C eller falde under 0°C.

Skal holdes uden for børns rækkevidde.

Må ikke sættes ind i beskadigede elstikkontakter.

Kun til indendørs brug (skal beskyttes mod fugt).

For at undgå kondensdannelse skal instrumentet have lov til at nå rumtemperatur inden brug.


Når instrumenthovederne kobles til håndtagene, skal man kontrollere, at instrumentpærens spænding svarer til håndtagets spænding. Sørg for at kontrolfunktionen står på 'off' efter det er tjekket.

Når genopladelige cellen udskiftes, slukkes for håndtaget og der isættes en ny celle. Sæt bundhætten på igen og anbring håndtaget i ladekilden.

Miljømæssigt


Batteriet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om genbrug af batterier.

Sæt tape over batteriets kontaktflader for at undgå kortslutning under bortskaffelse.

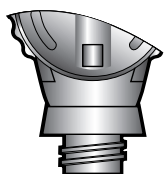


Påsættelse af instrumenthovedet på håndtaget


Forbindelsen mellem instrumenthovedet til håndtag er et gevind. Sæt instrumenthovedet på som vist og drej med uret. Sørg for at forbindelsen mellem hoved og håndtag er positiv.

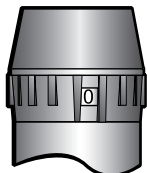

OFF

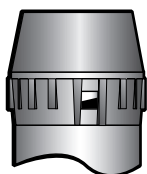

MELA CARGA

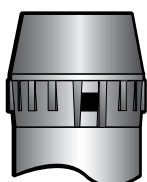

CARGA TOTAL

Kompatibilitet

Keeler Specialist, Professional, Standard, Practitioner og oftalmoskoper og Keeler er retinoskoper er kompatible med Keeler Vista 2,8v og 3,6v håndtag.

On/off-lysstyrkekontrol

Instrumentet slås til ved at dreje lysstyrkekontrollen til højre, som vist. Instrumentet slås fra ved at dreje lysstyrkekontrollen til venstre, som vist. Keeler C-størrelse håndtag har en strømindikator, der viser om instrumentet er slået til eller fra.

Rød = tændt

Sølv = slukket.

Identifikation af håndtag

Keeler håndtag i C-størrelse har farvekoder, der gør det muligt at skelne mellem et håndtag med tørbatteri (2,8v) og et opladeligt batteri (3,6v). Farvekoderne er som følger:

Blå base = 2,8v til tørbatterier

13A

Rød base = 3,6v til opladelige batterier

13B

Pærer fra Keeler har farvekoder på samme måde

Blå base = 2,8v til tørbatterier

Rød base = 3,6v til opladelige batterier



Når nye batterier og pærer sættes i, skal der sørges for, at spændingen svarer til håndtaget.

Bortskaf gamle batterier sikkert og i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Isætning/udskiftning af batterier

Skru batterihætten af, sæt batterierne i og sæt hætten på igen, som vist.

Der skal bruges følgende tørbatterier:

Keeler håndtag C-størrelse - 2 x 1,5v C batterier - Duracell MN 1400 eller tilsvarende.

Bemærk at opladelige håndtag fra Keeler normalt leveres komplet med et opladeligt batteri. (3,6v - 0,7Ah Ni-Cd)

Opgradering fra batteri til opladelige håndtag

Tørbatterier størrelse 2,8v C håndtag (blå base) kan opgraderes til et opladeligt håndtag 3,6v (rød base). Se afsnittet Tilbehør for det ønskede delnummer.

Bemærk at det også er nødvendigt at opgradere pæren fra 2,8v til 3,6v.

Kontakt Keeler Service for detaljer på telefon +44 (0)1753 857177.

Ladningsvejledning For Opladelige Håndtag Fra Keeler C-størrelse



Advarsel

Gør intet forsøg på at lade ikke-opladelige batterier.

Batterikonditionering

Det er nødvendigt, at opladelige batterier fra Keeler bliver konditioneret for at opnå maksimal levetid for produktet.
følg konditioneringsvejledningen som angivet:

Trin 1

Lad det nye Keeler opladelige batteri helt op. Dette tager cirka 15 timer.

Trin 2

Brug instrumentet UDEN AT OPLADE DET, FØR BATTERIET ER HELT TOMT.

Trin 3

Når batteriet er tomt skal det lades helt op igen. Dette tager cirka 15 timer.
Gentag trin 1, 2 og 3 tre gange, dvs. lad og aflad batteriet tre gange for at fuldføre konditioneringsprocessen.

Når batterierne er konditioneret som herover beskrevet kan instrumentet anbringes i laderen, når det, mellem undersøgelser, ikke er i brug.

Laderkompatibilitet

Opladelige håndtag fra Keeler kan bruges i følgende ladere også fra Keeler:
Udvalget af Vista-ladere (enkelte, dobbelte, mobile):

Keeler Mini-lader

Keeler Duo-lader.

Det skal sikres at der bruges en af de angivne strømforsyninger.

Ladere, der ikke er fabrikeret af Keeler



Advarsel

Lad kun håndtag fra Keeler lade op med en lader, der yder 65 mA strømbegrænset.



Opladelige håndtag fra Keeler C-størrelse kan bruges sammen med de fleste andre ladere. Inden instrumentet lades af en lader, der ikke er fremstillet af Keeler, skal man først sikre sig at den har 65 mA strømbegrænset. Tag derefter midten af bundhætten ud med en mønt. Nu kan håndtag fra Keeler lades fra en anden fabrikants lader.

Rengøringsvejledning

Instrumentet må kun gøres rent manuelt og uden at blive sænket ned i væske, som beskrevet herunder:

1. Tør overfladerne af med en ren absorberende, fnugfri klud, hårdt vredet op i en vand/vaskemiddelopløsning (2% i volumenprocent) eller vand/isopropylalkohol (70% i volumenprocent).
2. Sørg for at overskydende opløsning ikke løber ind i instrumentet. Vær omhyggelig med at kluden ikke er gennemvædet i opløsning.
3. Overfladerne skal tørres omhyggeligt efter med en ren, fnugfri klud.
4. Bortskaf det brugte rengøringsmateriale på en sikker måde.

Garanti & service

Ingen brugerservicérbare dele - al forebyggende vedligeholdelse og servicering må kun udføres af repræsentanter, der er godkendt af Keeler.

Håndtag fra Keeler er garanteret i 3 år og vil blive udskiftet eller repareret vederlagsfrit under forudsætning af følgende:

1. Fejlen skyldes defekt fabrikation
2. Købsbevis skal følge med hvert krav.

FREMSTILLET I UK AF:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tlf.: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

FRIKALD: 0800 521 251

DISTRIBUERET AF:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Frikald: 1 800 523 5620

Tlf.: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

'CE-mærket på dette produkt |
angiver, at det er afprøvet ☐
efter og opfylder kravene i ☐
direktivet om medicinsk ☐
udstyr, 93/42/EØF'



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distributør